

## Lavaojos. LAVAOJOS / DUCHAS DE EMERGENCIA. Ref. 12020



### Descripción del producto

Lavaojos sobre pedestal, con recogedor en ABS


Recipiente material ABS anticorrosivo

Componentes metálicos acero cincado

Acabado pintura epoxi verde emergencia

Dos rociadores de agua aireada a baja presión

Apertura automática por palanca accionamiento

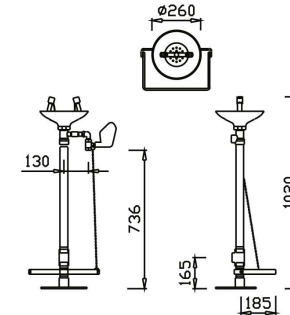

### Especificaciones técnicas:

Lavaojos sobre pedestal, con recogedor en ABS y pedal. El producto se compone de un pedestal, recipiente, pedal de activación y dos rociadores. El pedestal con pedal de accionamiento integrado fabricado en acero cincado, incorpora en su parte superior el recipiente y los rociadores. El recipiente, realizado en material termoplástico ABS anticorrosivo, incorpora en su interior el soporte de rociadores. El soporte de rociadores y rociadores, fabricados en tubo de latón cromado y conectados a una red hidráulica de mínimo 2 bares de presión, proporcionan un caudal de baja presión de agua aireada. La válvula de caudal de agua de apertura automática, al pulsar la palanca de accionamiento, permanece abierta hasta ser cerrada manualmente. El pedal de activación se conecta a la válvula de caudal mediante una cadena metálica. El conjunto montado está pintado con pintura epoxi de color verde emergencia, según Norma ISO 3864. El producto cumple con la normativa DIN 12899 y ANSI Z358-1 1990. El producto se ancla al pavimento con la plataforma del pedestal, fijado mediante 3 tacos y 3 tornillos. Las dimensiones totales del producto son 1020x260x185mm. El modelo de lavaojos es 12020.

### Características técnicas:

#### Especificaciones del producto

Pedestal fabricado en acero cincado.

Recipiente fabricado en ABS anticorrosivo.

Rociadores fabricados en tubo de latón cromado.

Acabado pintura epoxi color verde emergencia según Norma ISO 3864.

#### Especificaciones del embalaje

Peso del embalaje individual: 8,6Kg.

Dimensiones del embalaje individual: 265x165x880mm

Peso neto del producto: 8Kg.

Dimensiones del producto: 1020x260x185mm

Lavaojos. LAVAOJOS / DUCHAS DE EMERGENCIA. Ref. 12020



**Certificados:**

**Recomendaciones de instalación:**

**Recomendaciones de utilización:**

El personal debe ser instruido en el funcionamiento del lavaojos. El lavaojos debe ser probado cada dos días.

**Limpieza:** Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.